


PCR仪及电泳仪使用Protocol 修改人：赵翔
2023. 8. 8


最后修改时间：

PCR仪器（B112-114生物医学基础测试分析平台一区）

1. 打. 仪器开关。开关位于机身背侧左下方。
2. 点击操作平台的开关按钮。
3. User00登录（无需密码）。

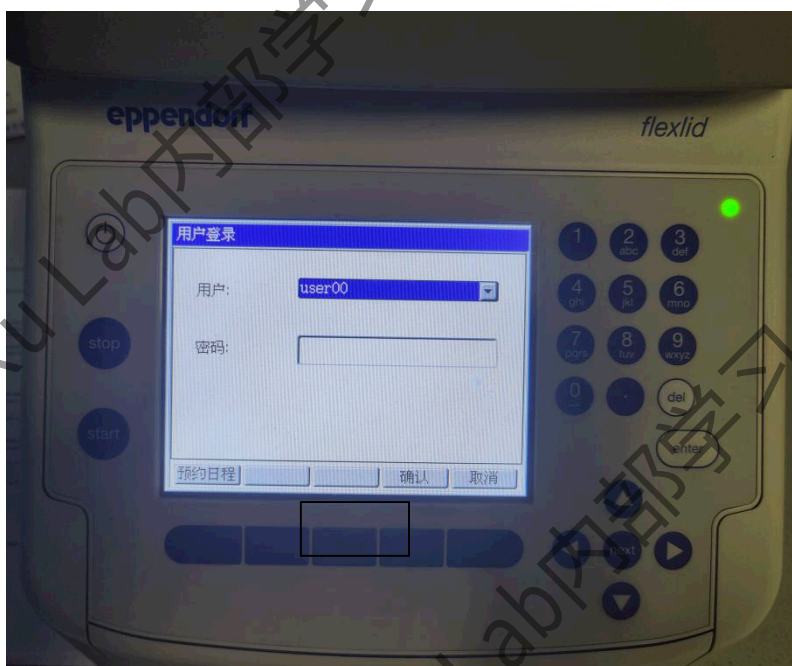

4. 选择b306文件夹，点击“enter”键。
5. 选择所需要的程序，点击“enter”键运营程序。

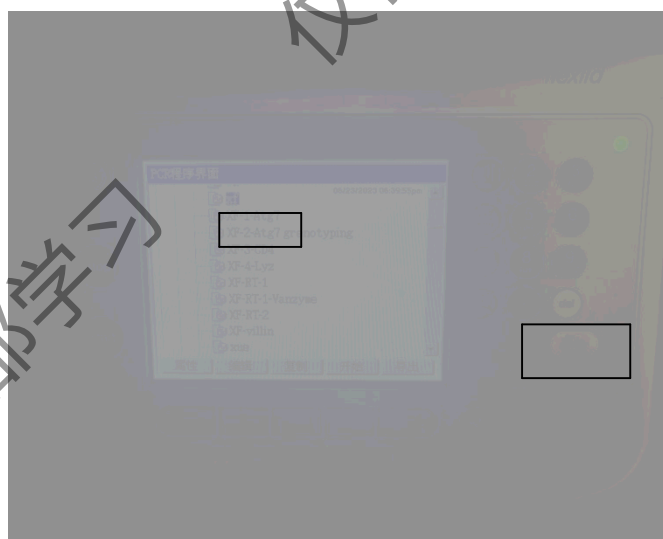



电泳液稀释方法及电泳仪的使用

1. 电泳液稀释：5×TAE溶液稀释成0.5×使用。
例如：需要使用200 ml的0.5×TAE，则量20 ml的5×TAE，180 ml去离子水混匀即可。
2. 将凝胶连同胶底板一起放入电泳槽中，注意有孔一方靠近电源**阴极**（**黑色端**），避免样品反向跑出凝胶。
3. 向电泳槽中加入电泳缓冲液，需覆盖胶表面至少2毫米的高度。
（一般情况，槽中电泳液量都可以满足要求，不足的添加。若电泳液太过于浑浊或碎胶过多，可整个槽更换新的电泳液。）
4. 使用移液枪将**基因鉴定样品（5-7μL）**注入凝胶点样孔内，在两侧孔中加入**Marker（2-3μL）**。
注意：样品上样完毕后应避免碰撞或移动胶槽，防止样品溢出到邻近的胶孔内。

PCR仪及电泳仪使用Protocol 修改人：赵翔
2023. 8. 8

最后修改时间：



5. 样品上样完毕后，放置盖子，正确匹配电极（保证黑对黑、红对红）。
6. 将接线连接到电泳仪上，仍需确保电极匹配电源的正负极。
7. 打开电泳仪右侧的开关按钮。
8. 按Manual键设定实验对应的参数（电压、时间等）
9. 观察槽中是否有气泡上升，有气泡即通电正常。
10. 按仪器上Run键开始跑胶。