


Ⅱ型糖尿病造模

1、柠檬酸钠缓冲液的配制：

- (1) 2.10g柠檬酸加入100ml双蒸水 → 柠檬酸母液（A液）
- (2) 2.94g柠檬酸三钠加入100ml双蒸水 → 柠檬酸钠母液（B液）
- (3) A: B=1:1.32，混匀，用A、B液调节至pH=4.2~4.5，即得到所需配置STZ的柠檬酸缓冲液。

2、简易流程图：

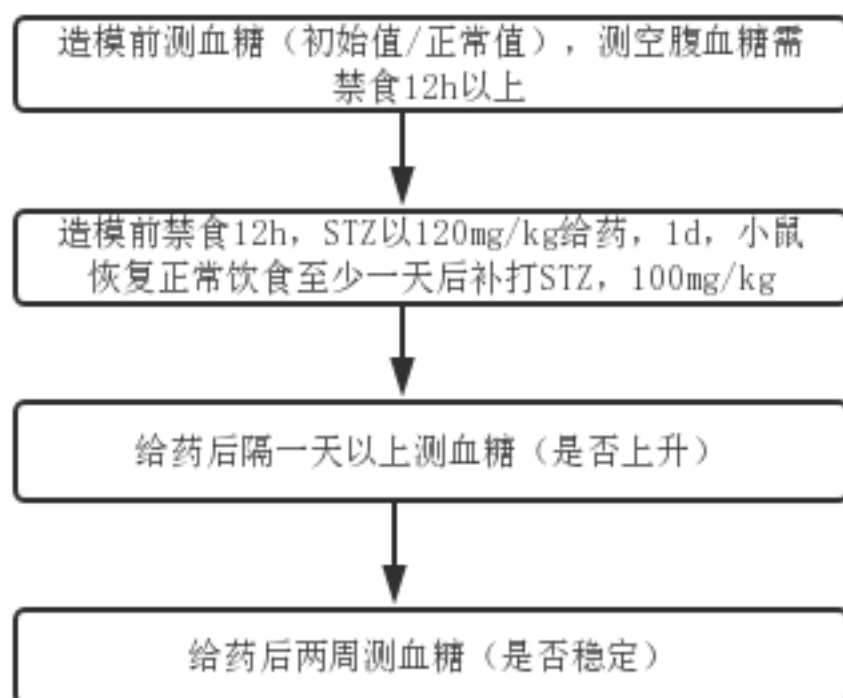

注：（1）STZ溶液不稳定，且见光易分解，必须现配现用，配制时要注意避光、冰浴。造模前给小鼠禁食12h以上，一般过夜禁食，不禁水，时间为晚上8点~早上8点（可适当延后保证早上配药时间充足），可以禁食13h，时间越长，效果越好。

（2）测血糖前禁食10h以上，如晚上10点~早上9点，血糖值>11.1mmol/L，则建模成功。若建模不成功，则给药为30mg/kg，按照1mg/25μL溶解。